

LG 2020/30

Montascale a ruote versione scalino da 24 a 30 cm

Il nuovo montascale LG2020/30 risponde all'esigenza di chi cerca un mezzo sicuro, forte e leggero, per il superamento di scalini di altezza 30 cm.



LG 2020/KIDS

Montascale a ruote sicuro e confortevole per bambini

Leggero, compatto e facile da manovrare, consente di affrontare le scale in modo confortevole e stabile, offrendo al contempo il massimo sostegno posturale.



■ AGGANCIO RAPIDO

Sistema di aggancio e sgancio semplificato per agevolare il montaggio e lo smontaggio del sedile in modo veloce e sicuro.



■ POSIZIONATORE ARTI INFERIORI

Supporto regolabile che mantiene le gambe del bambino nella corretta posizione.



■ DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE INCLINAZIONE

Il nuovo appoggio posteriore è regolabile per adattarsi meglio alle diverse altezze dello scalino aumentando la sicurezza e la stabilità senza la necessità di cercare il punto di equilibrio



■ LUCE DI CORTESIA A LED

La luce di cortesia a LED agevola la visualizzazione del gradino


■ COMPATTO E FACILE DA SMONTARE




	LG 2020	LG 2020/30
Peso complessivo ausilio [kg]	51.2	52
Peso corpo macchina "A" [kg]	28.4	29.2
Peso del sedile "B" [kg]	11.2	11.2
Peso dello schienale "C" [kg]	11.6	11.6
Portata massima [kg]	160	160
Potenza del motore [W]	350	350
Ingombro minimo [mm x mm x mm]	(535 x 740 x 1260)	(535 x 740 x 1260)
Ingombro massimo [mm x mm x mm]	(535 x 840 x 1570)	(535 x 840 x 1570)
Larghezza minima scala [cm]	58	58
Spazio minimo di manovra (Pianerottolo ad L) [cm x cm]	(70 x 70)	(70 x 70)
P – Profondità minima dello scalino [cm]	18	18
H1 – Altezza dello scalino [cm]	fino a 23	da 23 fino a 30
Velocità massima (con batteria carica) [gradini/min]	36	36
Batterie di alimentazione (n. 2 batterie per macchina)	12 Vdc – 9 Ah	12 Vdc – 9 Ah
Tensione di alimentazione del caricabatterie	230 Vac / 50 ÷ 60 Hz	230 Vac / 50 ÷ 60 Hz
Autonomia della batteria (rif pers. 80 / 160 kg) [numero di piani]	128 / 29	128 / 29
In salita [numero di piani]	64 / 14	64 / 14
In discesa [numero di piani]	64 / 14	64 / 14
Autonomia con indicatore carica in riserva [numero di piani]	3	3
Tempo medio di carica della batteria [ore]	8	8
Temperatura di immagazzinamento con imballo [°C] (condizioni di ambiente asciutto)	-10 ÷ 40	-10 ÷ 40
Campo di temperatura dell'ambiente di utilizzo [°C]	0 ÷ 40	0 ÷ 40
Dimensioni dell'imballo [mm x mm x mm]	970 x 570 x 650	970 x 570 x 650
Peso totale con imballo [Kg]	57,2	58
Livello di pressione sonora ponderato A [dB]	< 70	< 70



Scala dritta

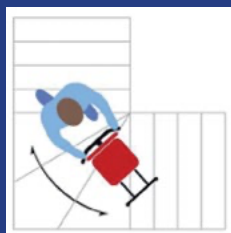

Scala trapezoidale

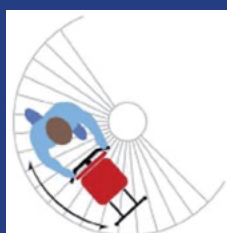

Scala chiocciola